EEG × Lastruct with 41 fields

Aktualna 'robocza' struktura to EEG struktura z danymi ciągłymi:

- 11		I	struktura z danymi ciągły	
Field ∠	Value	Min	Max	
<u>∞</u> setname	'AEP_grl'			nazwa datasetu
ilename	'AEP_grl.set'			nazwa pliku
🔤 filepath	'/home/kubel/Dropb			ścieżka dostępu
subject	II .			ID badanego
<u></u> group	II .			ID grupy badanych
group condition session	11			ID sytuacji dośw.
	[]			sesja Nr
comments nbchan	II .			
	5	5	5	liczba kanałów
trials	1	1	1	liczba powtórzeń (okien) – dane ciągłe = jedno dłuuuuugie okno
	93857	93857	93857	liczba punktów /kanał
pnts srate	200	200	200	częstość próbkowania
 ★min	0	0	0	
+ xmax	469.2800	469.2800	469.2800	
times data icaact	1x93857 double	0	469280	wartości na osi czasu danych
냂 data	5x93857 single	-0.0637	0.1575	dane - macierz 2 wymiary (liczba_kanałów x liczba próbek)
icaact_	[]			
icawin∨	[]			
🚠 icasphere	[]			
icaweights	[]			
icachansind	[]			
 chanlocs	1x5 struct			struktura z danymi o nazwach i lokalizacjach elektrod (→ patrz też str. 3 niżej)
→ urchanlocs	[]			
🔳 chaninfo	1x1 struct			
ref	'common'			
<u>-</u> event	1x94 struct			struktura z danymi o znacznikach (typy, czasy)
<u>-</u> urevent	1x94 struct			
eventdescription epoch	1x5 cell			
📥 epoch	[]			
epochdescription	0x0 cell			
<u>-</u> reject	1x1 struct			
<u>-</u> stats	1x1 struct			
🛨 specdata	[]			
→ specicaact	[]			
🔤 splinefile	II .			
🔤 icasplinefile	II .			
icasplinefile dipfit	[]			
istory history	1x1637 char			
abc saved	'yes'			
abc saved ⊞ etc	[]			
abc datfile	'AEP_gr1.fdt'			

EEG × 1x1 struct with 41 fields

struktura EEG z danymi podzielonymi na okna wg. znaczników

E IXI <u>struct</u> with 41 liek			znaczni			
Field ∠	Value	Min	Max			
setname	'AEP_gr1 epochs_n			nazwa datasetu		
🔤 filename	'AEP_gr1 epochs_n			nazwa pliku		
🔤 filepath	'/home/kubel/Dropb			ścieżka dostępu		
🔤 subject	'1'			ID badanego		
<u>⊫</u> group	H			ID grupy badanych		
group condition	II .			ID sytuacji dośw.		
∃ session	[]			sesja Nr		
≥ comments	2x23 char					
→ nbchan	5	5	5	liczba kanałów		
trials	94	94	94	liczba powtórzeń (okien)		
→ pnts	400	400	400	liczba punktów <u>na okno</u>		
→ srate	200	200	200	częstość próbkowania		
⊞ xmin	-1	-1	-1			
⊞ xmax	0.9950	0.9950	0.9950			
⊞ times	1x400 double	-1000	995	wartości na osi czasu danych <u>w oknie</u>		
→ data	5x400x94 single	-0.0516	0.0682	dane - macierz 3 wymiary (liczna_kanałów x liczba probek w oknie x liczba okien)		
icaact	[]					
icawin∨	[]					
icasphere	[]					
icaweights	[]					
icachansind	[]					
chanlocs	1x5 struct			struktura z danymi o nazwach i lokalizacjach elektrod		
urchanlocs	[]					
E chaninfo	1x1 struct					
ref	'common'					
ref event	1x94 struct			struktura z danymi o znacznikach (typy, czasy)		
 urevent	1x94 struct					
() eventdescription	1x6 cell					
■ epoch	1x94 struct					
() epochdescription	0x0 cell					
≣ reject	1x1 struct					
⊞ stats	1x1 struct					
specdata	[]					
specicaact	[]					
splinefile	11					
icasplinefile	H .					
dipfit	[]					
history	1x2137 char					
and saved	'yes'					
₃ saved ⊞ etc	[]					
otc datfile	'AEP_grl epochs_n					
- datille	ALF_GIT epochs_H					

struktura EEG.chanlocs z danymi o nazwach kanałów i lokalizacji elekotrod


EEG × EEG.chanlocs ×										
1x5 struct with 12 fields										
Fields	abc labels	type	H theta	H radius		 Y	<u></u> Z	\blacksquare sph_theta	Bsph_phi	Bsph_rag
1	'T3'	[]	-90	0.5332	5.1765e	84.5385	-8.8451	90	-5.9730	
2	'C3'	[]	-90	0.2667	3.8681e	63.1713	56.8717	90	41.9960	
3	'Cz'	[]	0	0	5.2047e	0	85	0	90	
4	'C4'	[]	90	0.2667	3.8679e	-63.1673	56.8761	-90	42	
5	'T4'	[]	90	0.5332	5.1765e	-84.5385	-8.8451	-90	-5.9730	
6										
7										

komenda: legend(EEG.chanlocs.labels)

sięga do kolumny labels w srtukturze EEG.chanlocs i znaleziony tam tekst wstawia do legendy figury

EEG.chanlocs(NR_WIERSZA).labels - adresuje nazwę z konkretnej linii w tej kolumnie

Załadowane datasety (gdy więcej niż jeden) są przecgowywane w zbiorczej zmiennej ALLEGG

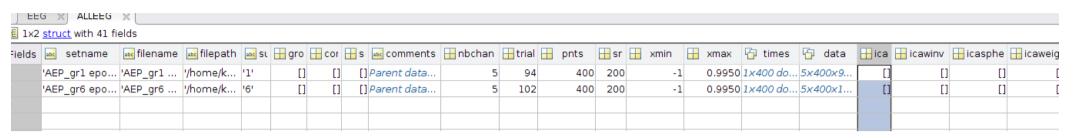

Z danych można korzystac adresując je bezpośrednio w zmiennej ALLEEG – można wtedy kożystac z danych za dóżnych datasetów w jednym skrypcie bez konieczności ich przeładowywania do zmiennej EEG:

ALLEEG(1).data to dane z datasetu pierwszego ALLEEG(2).data to dane z datasetu drugiego

. . .

ALLEEG(1).chanlocs.labels nazwy kanałów / elektrod z dataset 1 ALLEEG(2).chanlocs.labels nazwy kanałów / elektrod z dataset 2

• • •

ALLEEG(1).times oś czasu okien z dataset 1 ALLEEG(2).times oś czasu okien z dataset 2

• • •